

Applicazione del Colore e della Struttura di MiYO

Colore di base traslucido per aree gengivali.	TRANS RASPBERRY	TRANS CARNATION
Colore di base traslucido per aree gengivali arancione.	TRANS COPPER	
Colore bluastrò per le vene.	TRANS MIDNIGHT	
Colore in pasta rosso puro o da miscelare per sfumature.	TRANS GARNET	
Colori opachi non fluorescenti per la caratterizzazione al di sopra o dentro i colori gengivali traslucidi.	FLAMINGO	CRIMSON
	PLUM	MERLOT
	SORBET	SALMON
	SABLE	THISTLE
	HIBISCUS	
Nero puro per abbassare il valore delle masse MiYO pink.	NIGHT	
Polvere da inserire in materiali trasparenti.	VENULE	
Materiale Structure rosa scuro.	STRUCTURE ORCHID	
Materiale Structure marrone-rossastro.	STRUCTURE ROUGE	
Materiale Structure rosa-biancastro - ad esempio, per modellare il frenulo labiale.	STRUCTURE FROST	

Applicazione del Colore e della Struttura di MiYO

Per caratterizzare i colori base Vita Classic.	TRANS SHADE A	TRANS SHADE B	TRANS SHADE C	TRANS SHADE D
Per caratterizzare l'area cervicale.	TRANS STRAW	TRANS LOTUS	TRANS CLEMENTINE	
Per caratterizzare l'area interprossimale.	TRANS SAGE			
Riduce il valore di luminosità e ottieni un effetto di profondità.	TRANS STORM	TRANS SMOKE	TRANS SLATE	TRANS COBALT
Incrementa il valore di luminosità senza perdere traslucenza.	TRANS LUMIN	TRANS LUMIN PLUS		
Modifica i colori in pasta in un colore di base caldo e morbido.	TRANS SUNFLOWER			
Modifica i colori in pasta in un rossastro/viola.	TRANS GARNET			
Riproduce mammelloni naturali	MAMELON WHEAT	MAMELON CORAL	MAMELON PUMPKIN	
Riproduce l'effetto aureola in area incisale.	HALO SPRING	HALO AUTUMN		
Riproduce i difetti dello smalto, le macchie di calcio, il bianco gessoso delle cuspidi.	SNOW			
Crea effetti sbiancanti di rottura come crack lines o decolorazioni.	LINEN			
Colore in polvere per riprodurre solchi o fessure colorate.	FISSURE			
Verde complementare a Sunflower e Garnet, per modificare il croma.	MOSS			
Forte riduttore del valore di luminosità.	NIGHT			
Come supplemento e completamento per porzioni di smalto e per individualizzare al meglio la superficie.	STRUCTURE ENAMEL	STRUCTURE WINDOW	STRUCTURE GHOST	STRUCTURE ICE
Per restauri di grandi volumi e maggiore flessibilità durante la cottura - stratificazione ad alta temperatura.	HT STRUCTURE ENAMEL	HT STRUCTURE WINDOW		



Importatore in Italia:

FORNITURE DENTALI CASOTTO
DI CAPUZZO ENRICO & C. SNC
Via C.Anconitano, 10
35124 Padova
Tel: 0498805239 Cell: 3497217730
Mail: forniturercasotto@gmail.com
www.fornituredentalicasotto.com

Vendite e assistenza tecnica in Europa:


Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Germany
Telefon 0800-857 32 30
info@jensendental.de
www.miyoworld.eu | www.jensendental.de

Prodotto da:

Chemichl AG
Landstrasse 114
9490 Vaduz, Liechtenstein
info@chemichl.com
www.chemichl.com



... more MiYO

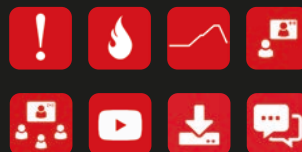

QUICK START GUIDE

Per un inizio perfetto.



www.miyoworld.eu






Istruzioni per l'uso & Preparazione

Istruzioni per l'uso

- Non versare il liquido in eccedenza fuori dal contenitore.
- Mescolare accuratamente MiYO Color, MiYO Structure e glaze paste con una spatola non metallica.
- Le paste non devono venire a contatto con l'acqua.
- Usare sempre un pennello pulito ed asciutto.

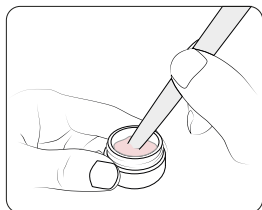

**Mescolare accuratamente
MiYO Color, Structure
e glaze paste con una
spatola non metallica.**

Preparazione

- Preparazione della struttura: secondo le specifiche del produttore (seguire le istruzioni del Workbook MiYO, pag. 19).
- La superficie deve essere pulita e priva di contaminazione superficiale prima di applicare il materiale.

Application

- Dopo la preparazione della superficie si può procedere all'applicazione dei colori ed effetti secondo il colore di riferimento e gli effetti necessari.

Storage and disposal

- Conservare in ambiente secco.
- Piccole quantità possono essere depositate nei rifiuti domestici. I residui o i restauri rimossi devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge nazionali.



Tabella di cottura

Parametri di cottura*	COLOR I STRUCTURE I GLAZE PASTE			
	ZrO ₂	InSync ZR	Disilicato di Litio	Press to Zirkon
Temperatura iniziale [°C]	400 - 450	400 - 450	400 - 450	400 - 450
Asciugatura [min]	3	3	3	3
Tempo di chiusura [min]	4	4	4	4
Incremento termico [°C / min]	45	45	45	45
Mantenimento 1 [s]	30 - 45	30 - 45	30 - 45	30 - 45
Inizio vuoto [°C]	580	580	580	580
Temperatura finale [°C]	720	720	710	720
Fine vuoto [°C]	720	720	710	720
Mantenimento 2 [s]**	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Tempo d'apertura [min]	1	1	1	1

Parametri di cottura*	HT STRUCTURE	
	ZrO ₂	InSync Zr
Temperatura iniziale [°C]	400 - 450	400 - 450
Asciugatura [min]	3	3
Tempo di chiusura [min]	4	4
Incremento termico [°C / min]	45	45
Mantenimento 1 [s]	30 - 45	30 - 45
Inizio vuoto [°C]	600	600
Temperatura finale [°C]	775	775
Fine vuoto [°C]	775	775
Mantenimento 2 [s]**	60	60
Tempo d'apertura [min]	1	1

* Le temperature di cottura sono valori standard e possono variare a seconda del tipo di forno e delle dimensioni (volume) del restauro.

** In base al grado di lucentezza desiderato, il tempo di mantenimento è di 30 - 60 secondi.



Formazione e assistenza



Registrazione al portale clienti

Nel portale clienti vi mettiamo a disposizione materiale formativo e informativo esclusivo. Utilizzate i video di formazione per imparare a utilizzare MiYO e MiYO pink in modo sicuro. Le istruzioni di cottura e le istruzioni di programmazione del forno vi aiuteranno a programmare il vostro forno.

Registrazione:

www.miyoworld.eu/en/login-en/registrierung

Per la registrazione è necessario il numero del kit MiYO, che si trova sul coperchio del kit MiYO e sotto il liquido.



Istruzioni

Tutti i documenti relativi a MiYO, MiYO pink e alle paste di smalto sono disponibili per il download in varie lingue sul nostro sito web o sulla chiavetta USB allegata. www.miyoworld.eu/en/downloads



Trovate ulteriori informazioni nella vostra lingua sulla chiavetta USB.



Supporto

Avete domande su MiYO? Contattate il vostro rivenditore MiYO.
Per l'assistenza tecnica potete anche contattare Jensen: support@jensendental.de.




Formazione e corsi

Per la formazione e i corsi MiYO, contattare il rivenditore MiYO locale:
FORNITURE DENTALI CASOTTO
DI CAPUZZO ENRICO & C. SNC
Via C.Anconitano, 10
35124 Padova
Tel: 0498805239 Cell: 3497217730
Mail: forniturecasotto@gmail.com
www.fornituredentalicasotto.com



Note ai grafici di cottura MiYO

Regolazione di vari parametri di cottura in base alle dimensioni del restauro, per i dettagli si veda MiYO Workbook p. 14
Attenzione: Avvio ritardato del vuoto!

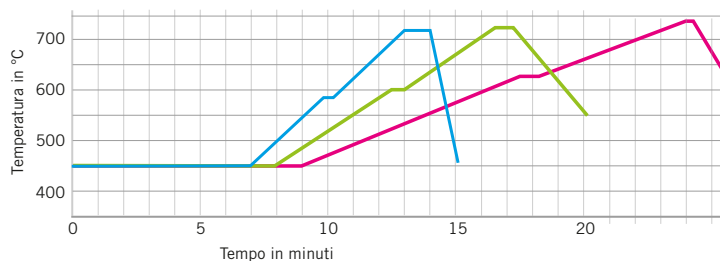

Corone singole e ponti fino a 4 unità
5 - 8 unità
9 - 14 unità